

# PHILIPS

# sonicare

the sonic toothbrush

## Poetsinstructies



### Tandpasta aanbrengen

Voor een optimale poetsbeurt met uw Philips Sonicare raden we u aan een dun laagje tandpasta of gel aan te brengen ter grootte van een erwt op de volledige lengte van de borstelkop. Schakel de tandenborstel pas aan als u de borstelkop in uw mond heeft.



### De tandenborstel plaatsen

Plaats de borstelkop in een hoek van ongeveer 45 graden langs de tandvleesrand. Oefen tijdens het tandenpoetsen zo min mogelijk druk uit.



### Van tand tot tand

Glijd met de borstelkop langzaam over de tanden. De gepatenteerde dynamische reinigungsactie verwijdert tandplak langs de tandvleesrand en diep tussen de tanden. Het is aanbevolen hiernaast ook flossdraad te gebruiken.



### Binnenkant van de tanden

Laat de borstelkop langzaam over de binnenkant van de tanden glijden. Besteed meer tijd aan de binnenkant van de onderste voortanden waar de kans op tandplak groter is.




### Kauwvlakken

Reinig de kauwvlakken door langzaam met de borstelkop van tand tot tand te glijden. Laat uw Philips Sonicare het werk doen.



### Achterste tanden

De gebogen hals van de Philips Sonicare maakt het makkelijker moeilijk bereikbare plaatsen extra aandacht te geven. Indien gewenst, kunt u hiervoor de mini borstelkop gebruiken.

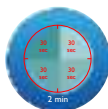

### Poetstijd

Met Philips Sonicare wordt het makkelijker om de aanbevolen poetstijd van 2 minuten vol te maken, dankzij de ingebouwde Quadpacer die om de 30 seconden een geluidssignaal laat horen om u eraan te herinneren dat het tijd is om de volgende kwadrant van de mond te poetsen.

Op FlexCare+ kiest u via de Gum-Care stand voor de 3 minuten cyclus die zorgt voor een verbeterde gezondheid van het tandvlees.



### Opzetborstel

Vervang tijdig uw opzetborstel. Na 6 maanden voor de Elite-modellen, na 3 maanden voor de FlexCare+-modellen.



### UV-Reiniger

Gebruik regelmatig de UV-reinigingstechnologie die helpt om ziektekiemen op uw opzetborstel te verwijderen.\*

\* Uitsluitend beschikbaar bij bepaalde FlexCare+-modellen

# PHILIPS

sense and simplicity

# Poetsinstructies voor dragers van een beugel



## Tandpasta aanbrengen

Voor een optimale poetsbeurt met uw Philips Sonicare raden we u aan een dun laagje tandpasta of gel aan te brengen ter grootte van een erwt op de volledige lengte van de borstelkop. Schakel de tandenborstel pas aan als u de borstelkop in uw mond heeft.



## De tandenborstel plaatsen

Begin met de tanden en kiezen in de bovenkaak. Plaats de borstelkop in een hoek van ongeveer 45 graden boven de draden en de slotjes, op de rand van tandvlees en tand. Oefen lichte druk uit en maak gedurende 2 seconden zachtjes ronddraaiende bewegingen met de borstel op zo'n manier dat de lange haren zich tussen de tanden bevinden. Schuif dan de borstel een stukje op naar een aansluitende plaats en maak weer dezelfde korte bewegingen enz.



Plaats weer de borstelkop boven de draden en slotjes, maar nu zo, dat juist in de apparatuur wordt gepoetst. Maak dezelfde poetsbeweging als hiervoor.



Plaats de borstelkop onder de draden en slotjes zo, dat vanaf de snijrand en het kauwvlak van de tanden en kiezen in de apparatuur wordt gepoetst. Maak weer dezelfde bewegingen met de borstelkop als hiervoor.




## Binnenkant van de tanden

Laat de borstelkop langzaam over de binnenkant van de tanden glijden. Besteed meer tijd aan de binnenkant van de onderste voortanden waar de kans op tandplak groter is.



## Kauwvlakken

Reinig de kauwvlakken door langzaam met de borstelkop van tand tot tand te glijden. Laat uw Philips Sonicare het werk doen.

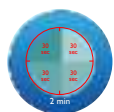

## Achterste tanden

De gebogen hals van de Philips Sonicare maakt het makkelijker moeilijk bereikbare plaatsen extra aandacht te geven. Indien gewenst, kunt u hiervoor de mini borstelkop gebruiken.



## Poetstijd

Met Philips Sonicare wordt het makkelijker om de aanbevolen poetstijd van 2 minuten vol te maken, dankzij de ingebouwde Quadpacer die om de 30 seconden een geluidssignaal laat horen om u eraan te herinneren dat het tijd is om de volgende zone van de mond te poetsen. Op FlexCare+ kiest u via de Gum-Care stand voor de 3 minuten cyclus die zorgt voor een verbeterde gezondheid van het tandvlees.



## Borstelkop

Vervang tijdig uw opzetborstel. Na 6 maanden voor de Elite-modellen, na 3 maanden voor de FlexCare+-modellen.



## UV-Reiniger

Gebruik regelmatig de UV-reinigingstechnologie die helpt om ziektekiemen op uw opzetborstel te verwijderen.\*

\* Uitsluitend beschikbaar bij bepaalde FlexCare+-modellen

**PHILIPS**  
sense and simplicity